


Como Usar un Inhalador Con un "Spacer"

1. QUITE la tapa del inhalador
2. AGUITE el medicamento
3. COLOQUE el inhalador en el spacer
4. EXHALE fuertemente
5. COLOQUE la boquilla del "spacer" en su boca, después CIERRE sus labios alrededor de la boquilla
6. PRESIONE el inhalador para obtener un bombazo del medicamento dentro del "spacer"
7. Tome una respiración LENTA y profunda
8. AGUANTE la respiración y CUENTE hasta diez(10), después RESPIRE normalmente
9. Para asegurarse que toda la medicina ha sido inhalada, repita los pasos para respirar la medicina SIN presionar el inhalador otra vez.
10. ESPERE 60 segundos para administrar el segundo bombazo. REPITA los pasos del 6 al 9 para cada bombazo.

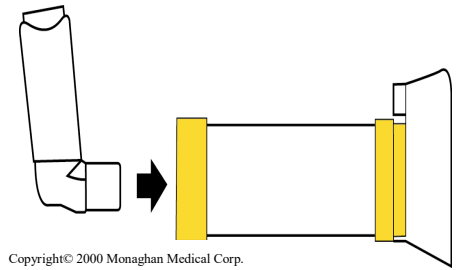

Para usar un "Aerochamber" con una mascara, siga los pasos del 1-4 con la mascara en su lugar. Haga que el niño respire para dentro y para afuera 6-10 veces para estar seguro que toda medicina ha sido inhalada. Espere 60 segundos para tomar el próximo bombazo y repetir estos pasos.